

# Analyse des Haloanisoles et Halophénols dans l'eau

*Les contaminants HaloAnisoles / HaloPhénols générateurs bien connus de déviations organoleptiques font l'objet d'une surveillance intensive de la part des tonneliers et des producteurs de vin. Très impliqué dans l'analyse de ces contaminants depuis plus de 15 ans, notre laboratoire est régulièrement sollicité pour réaliser cette prestation.*

*Cette méthode peut également être utilisée pour des simulants vins, des solutions synthétiques ou des macérats.*

## Nous contacter


Laboratoire Etudes et Contrôles  
8, Rue de la Haute Sarrazine  
16 100 COGNAC —France

[contact@lec-cognac.fr](mailto:contact@lec-cognac.fr)

(+33) (0)5 45 82 49 54

[www.lec-cognac.fr](http://www.lec-cognac.fr)



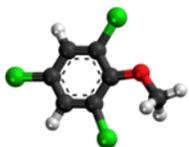

# PERFORMANCES DE LA METHODE



## LIMITES DE DETECTION<sup>(2)</sup> ET DE QUANTIFICATION<sup>(3)</sup> POUR LA METHODE :

Nom abrégé	Nom complet	Ld (ng/L)	Lq (ng/L)
TCA	2,4,6-trichloroanisole	0,2	0,5
TCP	2,4,6-trichlorophénol	0,7	2,0
TBA	2,4,6-tribromoanisole	0,2	0,5
TBP	2,4,6-tribromophénol	0,7	2,0
6 TeCA	2,3,4,6-tétrachloroanisole	0,2	0,5
6 TeCP	2,3,4,6-tétrachlorophénol	0,9	2,7
PCA	Pentachloroanisole	0,2	0,5
PCP	Pentachlorophénol	0,7	2,0

Volume minimum d'échantillon requis : **125 mL**

Ces performances ont été validées selon la norme NF-V03-110\* révision mai 2010. Nous rappelons que ces limites sont  systématiquement contrôlées lors de nos sessions d'analyses afin de garantir ces performances en routine.

*\*Analyse des produits agricoles et alimentaires – Protocole de caractérisation en vue de la validation d'une méthode d'analyse quantitative par construction du profil d'exactitude*



Si nécessaire, la méthode « triple extraction » peut être appliquée, ce qui permet de diminuer les limites de quantification indiquées dans le tableau d'un facteur 3. Pour cela 350 mL d'échantillons seront nécessaires.



## INFORMATIONS GENERALES SUR L'ANALYSE DES HALOANISOLE/PHENOLS DANS L'EAU :

- L'analyse de ces contaminants à des seuils du ppt (ng/L) est l'une des plus exigeantes en matière de sensibilité. Pour réaliser cette analyse, notre laboratoire suit les recommandations du Guide Technique d'Accréditation LAB GTA 26<sup>(4)</sup> émis par le COFRAC.
- La technique SBSE<sup>(1)</sup>-TDGCMS mise en œuvre au LEC est reconnue pour être la plus sensible pour cette famille de molécules, d'où son utilisation généralisée dans le domaine de l'environnement (eau potable et eau de captage).
- Pour la validation et la surveillance de la méthode d'analyse, nous travaillons directement sur la matrice eau au lieu d'une solution synthétique afin de garantir la réalité des performances annoncées
- LEC peut fournir des flacons spécifiquement conditionnés à haute température pour le prélèvement d'échantillons liquides. Nous rappelons qu'il est impératif de placer un film aluminium entre le col du flacon et le bouchon pour éviter tout contact du liquide avec des matières plastiques.

(1) SBSE : Stir Bar Sportive Extraction (<http://www.gerstel.com/en/twister-stir-bar-sorptive-extraction.htm>)

(2) Limite de Détection (Ld) : Limite à partir de laquelle une méthode d'analyse permet de confirmer la présence d'un composé sans toutefois délivrer de valeur quantitative

(3) Limite de Quantification (Lq) : Limite à partir de laquelle une méthode d'analyse peut délivrer une valeur quantitative avec une incertitude associée

(4) Guide Technique d'Accréditation – Analyse de résidus de pesticides et de contaminants organiques dans les denrées alimentaires destinées à l'homme ou aux animaux, les matrices biologiques d'origine animales ([www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr))

